

Brugsanvisning: asmoFilcon A (40 % vand) til 2-UGERSLINSER eller månedslinser

Vigtigt

- Læs følgende instruktioner grundigt før brug, og opbevar dette dokument et sikkert sted for fremtidig reference.
- Følg altid instruktionerne i dette dokument samt dem fra din øjenlæge eller optiker for korrekt brug af kontaktlinser og linseplejeprodukter, herunder linseetui.

FOR 2-UGERSLINSER

Introduktion

asmoFilcon A (40 % vand) er en blåfarvet, blød kontaktlinse i silikonehydrogel med 40 % vandindhold.

Den sterile asmoFilcon A (40 % vand) er individuelt pakket i en folieforseglet plastikbeholder og nedsænket i bufferet saltvandsopløsning.

Indikationer

asmoFilcon A (40 % vand) er beregnet til daglig brug eller op til 7 dages forlænget slid og til korrektion af refraktiv ametropi (myopi, hyperopi og/eller astigmatisme) i non-afakiske sygdomsfrie øjne.

Brugsbegrænsninger

Rengør og desinficer kontaktlinserne efter udtagning i henhold til den rensningsmetode, der er anbefalet af din øjenlæge eller optiker. Udskift kontaktlinserne hver anden uge med nye linser. Sørg for at konsultere din øjenlæge eller optiker for brug af linser baseret på dine individuelle behov. Bortskaf altid kontaktlinserne efter den angivne brugsperiode. Brug af kontaktlinserne efter den angivne brugsperiode øger risikoen for øjenproblemer.

FOR MÅNEDSLINSER

Introduktion

asmoFilcon A (40 % vand) er en blåfarvet, blød kontaktlinse i silikonehydrogel med 40 % vandindhold.

Den sterile asmoFilcon A (40 % vand) er individuelt pakket i en folieforseglet plastikbeholder og nedsænket i bufferet saltvandsopløsning.

Indikationer

asmoFilcon A (40 % vand) er beregnet til daglig brug og til korrektion af refraktiv ametropi (myopi, hyperopi og/eller astigmatisme) og/eller presbyopi non-afakiske sygdomsfrie øjne.

Brugsbegrænsninger

Rengør og desinficer kontaktlinserne efter udtagning i henhold til den rensningsmetode, der er anbefalet af din øjenlæge eller optiker. Udskift kontaktlinserne hver måned med nye linser. Sørg for at konsultere din øjenlæge eller optiker for brug af linser baseret på dine individuelle behov. Bortskaf altid kontaktlinserne efter den angivne brugsperiode. Brug af kontaktlinserne efter den angivne brugsperiode øger risikoen for øjenproblemer.

KONTRAINDIKATIONER

Brug ikke kontaktlinser, hvis du lider af følgende.

- Akut eller subakut inflammation eller infektion i forreste øjekammer
- Eventuel sygdom, skade eller anormalitet, der påvirker hornhinden, bindehinden eller øjelågene
- Alvorlig lacrimal sekretionsinsufficiens (tørre øjne)
- Korneal hypoestesi (reduceret korneal følsomhed)
- Enhver systemisk sygdom, der kan påvirke øjnene negativt ved at bruge kontaktlinser
- Allergiske reaktioner, der kan forårsages af eller overdrives ved at anvende kontaktlinser
- Eventuel aktiv korneal infektion
- Røde eller irriterede øjne
- Ufuldstændig heling af hornhinde efter øjehirurgi

ADVARSLER

Vær opmærksom på følgende advarsler vedrørende brugen af kontaktlinser.

- Øjeproblemer, der skyldes brugen af kontaktlinser og brug af linseplejeprodukter, såsom hornhindsår, kan udvikles hurtigt og føre til synstab. Hvis du oplever ubehag i øjnene, kraftig tåredannelse, synsændringer, røde øjne eller andre problemer, skal du straks fjerne linserne og kontakte din øjenlæge eller optiker.

FORHOLDSREGLER

- Vær forsigtig, når du håndterer kontaktlinserne (pas på, du ikke taber dem).
- Rør ikke kontaktlinserne med dine fingernegle.
- Tag kontaktlinserne på, før du anvender kosmetik. Brug ikke kosmetik, lotions, cremer eller sprays, mens du håndterer kontaktlinserne.
- Kontakt din øjenlæge eller optiker, før du anvender medicin i øjnene.
- Hvis kontaktlinserne føles tørre på din øjne, så tilføj nogle dråber smørelse eller opløsning til vådgenopretning (anbefalet af din øjenlæge eller optiker) direkte i øjnene, og vent indtil linserne kan bevæge sig frit på øjnene, før de fjernes. Hvis ubehaget vedvarer, skal du straks kontakte din øjenlæge eller optiker.
- Undgå skadelige eller irriterende dampe og gasser, mens du bærer kontaktlinser.
- Hvis der sprøjtes kemikalier i øjnene, skal du straks skylle øjnene med vand, fjerne kontaktlinserne og kontakte din øjenlæge eller optiker eller besøge en skadestue.
- Kontakt din øjenlæge eller optiker vedrørende brug af kontaktlinser under sport- eller vandaktiviteter eller til bestemte erhverv.
- For multifokale eller torisk multifokale kontaktlinser anbefales det, at du kun anvender linserne i velkendte situationer (ikke synligt krævende situationer) under tilpasningsperioden. Undgå især kørsel af motorkøretøj under tilpasningsperioden.
- Skarp lys under brugen af multifokale eller multifokale toriske kontaktlinser kan forårsage nedsat synsskarphed. Kontakt din øjenlæge eller optiker, hvis du følger dig utilpas, når du anvender linserne i skarpt lys.
- Opfølgingsbesøg er nødvendige for at sikre dine øjnes fortsatte helbred.
- Kontakt din øjenlæge eller optiker, hvis du ønsker at skifte linsetype eller parametre.
- Informer din læge om, at du anvender kontaktlinser.
- Opbevar kontaktlinserne ved stuetemperatur. Lad ikke linserne fryse.
- Kontakt din øjenlæge eller optiker, hvis du ønsker at opbevare kontaktlinserne i længere perioder.
- Kontakt din øjenlæge eller optiker, hvis kontaktlinserne bliver tørre i et linseetui.
- Del ikke kontaktlinserne med andre personer.

BIVIRKNINGER

Hvis nogle af følgende problemer forekommer, skal du straks fjerne kontaktlinserne og undersøge dem for at sikre, at de er uden skade. Hvis kontaktlinserne ikke er beskadigede, skal de renses og desinficeres, før de anvendes igen. Hvis problemet vedvarer, skal du fjerne linserne og søge behandling. I modsat fald kan det resultere i alvorlig øjenskade, såsom infektion, hornhindsår, neovaskularisation og iritis.

- Øjesvien, forbrænding, kløen eller anden smerte i øjnene
- Kontinuerlig foremmelse af fremmedlegeme eller kløe
- Kraftigt slid, usædvanlig øjesekretion, rødhed, reduceret visuel styrke, sløret syn, haloer, fotofobi eller tørre øjne

Hvis der forekommer hændelser i forbindelse med brugen af kontaktlinserne, skal det rapporteres til den autoriserede repræsentant og/eller fabrikant og den kompetente myndighed.

HÅNDTERING AF KONTAKTLINSENER

- Vask, skyl og tør altid dine hænder grundigt, før du håndterer kontaktlinserne.
- Brug ikke kontaktlinserne, hvis de sterile pakker har været åbne eller er beskadigede, eller hvis udløbsdatoen er passeret.
- Håndtør altid højre og venstre kontaktlinse i den samme rækkefølge for at undgå at tage fejl af dem.

Åbning af den folieforseglede plastikbeholder:

1. Fjern folien fra beholderen for at åbne pakken.
2. Find en kontaktlinse med den indadbuede side opad i beholderen.
3. Tag forsigtigt linsen ud af beholderen, og undersøg den for at sikre, at den er fri for skade eller fremmedlegemer.

Isætning af kontaktlinserne:

Den generelle procedure til isætning af kontaktlinser er beskrevet nedenfor. Kontakt din øjenlæge eller optiker for yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

1. Placer kontaktlinserne på fingerspidsen af din dominerende hånd med den indadbuede side opad.
 2. Kontrollér profilen af linsen for at sikre, at den ikke vender på vrangen.
 3. Hold øjenlågene åbne ved at trække det øverste øjenlåg op med pegefingern på din ikke-dominerende hånd og det nederste øjenlåg med langfingeren på din dominerende hånd.
 4. Før langsomt linsen op til øjet, mens du kigger lige ud, og placer forsigtigt linsen på hornhinden.
 - Pres ikke linsen mod øjet.
 5. Kig ned, slip det øverste øjenlåg først, derefter det nederste og blink forsigtigt.
 6. Gentag denne procedure for den anden linse.
- Hvis synet er sløret efter isætning af kontaktlinserne:
 - Hvis kontaktlinserne ikke er centreret på hornhinden:
 - Se ind i spejlet, og rør forsigtigt ved kanten af linsen for at flytte den op på hornhinden, mens du åbner øjet. Brug fingertryk på kanten af det øverste eller nederste øjenlåg, indtil linsen er centreret på hornhinden.
 - Hvis kontaktlinserne er centreret på hornhinden:
 - Fjern linsen. Mulige årsager er som følger:
 - Linseoverfladen er beskadigt.
 - Linserne er på de forkerte øjne.
 - Linserne er blevet sat i på vrangen i øjnene.
 - Hvis synet stadig er sløret, efter at ovenstående problemer er løst, skal du fjerne kontaktlinserne og kontakte din øjenlæge eller optiker.
 - Hvis du føler væsentlig ubehag, mens du bærer kontaktlinser, skal du straks fjerne linsen og kontakte din øjenlæge eller optiker.
 - Toriske kontaktlinser skal placeres på hornhinden med styremærket nedad (se Fig. 1).
 - For multifokale kontaktlinser (ADD HIGH), placeres linsen på hornhinden med trekantsmærket pegende til den temporale side (se Fig. 2).
 - De multifokale toriske kontaktlinser har styremærker til at kontrollere linseplaceringen (se Fig. 3).

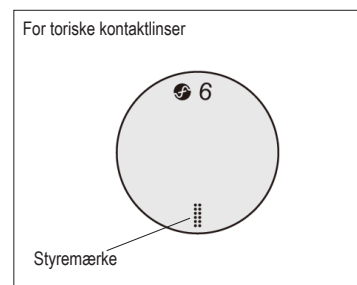


Fig. 1

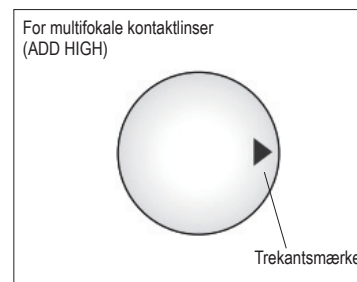


Fig. 2

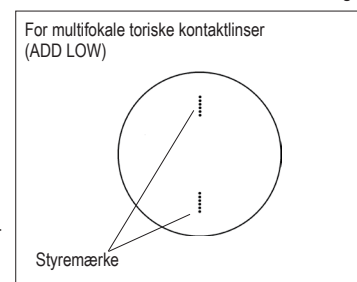


Fig. 3

Udtagning af kontaktlinser:

1. Se opad, mens du holder hovedet lige.
2. Træk det nederste øjenlåg ned med langfingeren på din ikke-dominerende hånd, og placer pegefingern på den nedre kant af kontaktlinserne.
3. Skub linsen ned til den nederste hvide del af øjet.
4. Knib forsigtig linsen sammen mellem tommel- og pegefinger på din dominerende hånd.
5. Fjern linsen.
6. Gentag denne procedure for den anden linse.

PLEJE AF KONTAKTLINSENER

- Brug altid linseplejeprodukter, der er anbefalet af din øjenlæge eller optiker. Brug aldrig produkter til formfaste kontaktlinser.
- Brug aldrig postevand til plejen af kontaktlinser og linsestøt. Brug af postevand øger risikoen for mikrobiel infektion.
- Brug altid friske linseplejeprodukter, hvis udløbsdato ikke er overskredet.
- Brug ikke andre eller blandede linseplejeprodukter, medmindre andet er angivet af produktinstruktionerne eller din øjenlæge eller optiker.
- Varmedesinficering anbefales ikke.
- Opbevar kontaktlinserne fuldstændigt nedsænket i en opbevaringsopløsning, når de ikke er i brug.
- Rens og skyl linsestøt med produkter hertil, og lad det lufttørre efter hver brug. Udskift linsestøt regelmæssigt.

SYMBOLER BRUGT PÅ PAKKEN OG DEN FOLIEFORSEGLEDE PLASTIKBEHOLDER

FØLGENDE BRUGS- OG ANVENDINGSANVISNINGER GELDER FØLGENDELEDER					
SYMBOL					
DEFINITION	Se brugsanvisning	Batchkode	Anvendes inden (udløbsdato)	Produktionsdato	
SYMBOL					
DEFINITION	Steriliseret ved hjælp af damp eller tør varme	Enkelt sterilt barriersystem	Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget	Må ikke fryses	
SYMBOL					
DEFINITION	Medicinsk enhed	Unik enhedsidentifikation	EU-importør		
SYMBOL	DIA	BC	P	CYL	AXIS
DEFINITION	Diameter	Basiskurve	Dioptri (linsestyrke)	Dioptri (cylinderstyrke)	Cylinderakse
SYMBOL	ADD	HIGH		LOW	
DEFINITION	Dioptri (additionsstyrke)	Design med høj additionsstyrke (+2,00 D)		Design med lav additionsstyrke (+1,00 D)	

Fabrikant: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

EC REP Autoriseret repræsentant: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Udstedelsesdato 2023-09

©2023, Menicon Co., Ltd.

CE
0483

RDASRBPI008_da