

Használati útmutató: asmoofilcon A (40% víztartalom) 2 hetes vagy 1 hónapos kontaktlencsékhez

Fontos

- **Használat előtt figyelmesen olvassa el, majd őrizze meg ezt a betegájékoztatót!**
- **A kontaktlencsék és lencsetisztító termékek, valamint a tárolódobozok megfelelő használatához mindig tartsa be a jelen betegájékoztatót, valamint a szeméské vagy a kontaktológusa utasításait.**

2 HETES KONTAKTLENCSÉK ESETÉN

Bevezetés

asmoofilcon A (40% víztartalom) kékes színezésű, lágy, szilikon-hidrogél kontaktlencse, 40%-os víztartalommal.

Minden steril asmoofilcon A (40% víztartalom) kontaktlencse külön lefóliázott műanyag tárolóban, fiziológias sóoldatban van elhelyezve.

Javallatok

Az asmoofilcon A (40% víztartalom) kontaktlencse napi viseletre javasolt, legtovább 7 napig viselhető, javítva a fénnytörési hibákat (myopia, hypermetropia és/vagy asztigmatia) azon egyének számára, akik nem szenvednek lencsehiányosságban vagy szembetegségben.

Viselési korlátozások

Eltávolítás után tisztítsa meg és fertőtlenítsen a kontaktlencsét a szeméské vagy a kontaktológusa által ajánlott tisztítási és fertőtlenítési eljárással. 2 hetente cserélje ki a kontaktlencsét új lencsékkel.

Kérje ki a szeméské vagy a kontaktológusa tanácsát a lencse viselésével kapcsolatosan a személyes igényeinek megfelelően. A viselési időszak lejárata követően mindig dobja el a kontaktlencsét. A kontaktlencse viselése az előírt időn túl megnöveli a szemproblémák kockázatát.

1 HÓNAPOS KONTAKTLENCSÉK ESETÉN

Bevezetés

asmoofilcon A (40% víztartalom) kékes színezésű, lágy, szilikon-hidrogél kontaktlencse, 40%-os víztartalommal.

Minden steril asmoofilcon A (40% víztartalom) kontaktlencse külön lefóliázott műanyag tárolóban, fiziológias sóoldatban van elhelyezve.

Javallatok

Az asmoofilcon A (40% víztartalom) kontaktlencse napi viseletre javasolt, javítva a fénnytörési hibákat (myopia, hypermetropia és/vagy asztigmatia) és/vagy távollátás azon egyének számára, akik nem szenvednek lencsehiányosságban vagy szembetegségben.

Viselési korlátozások

Eltávolítás után tisztítsa meg és fertőtlenítsen a kontaktlencsét a szeméské vagy a kontaktológusa által ajánlott tisztítási és fertőtlenítési eljárással. Havonta cserélje ki a kontaktlencsét új lencsékkel.

Kérje ki a szeméské vagy a kontaktológusa tanácsát a lencse viselésével kapcsolatosan a személyes igényeinek megfelelően. A viselési időszak lejárata követően mindig dobja el a kontaktlencsét. A kontaktlencse viselése az előírt időn túl megnöveli a szemproblémák kockázatát.

ELLENJAVALLATOK

Ne használja a kontaktlencsét az alábbi esetekben:

- Heveny vagy szubakut gyulladás, vagy az elülső szemcsarnok bármilyen fertőzéses betegsége
- A szaruhártya, kötőhártya, és a szemhéj bármilyen betegsége, sérülése, vagy rendellenessége
- Súlyos könnyelválasztási elégtelenség (szemszárazság)
- Cornea hypaesthesia (a szaruhártya érzékelés csökkenése)
- Bármely szisztémás megbetegedés, amelyet negatívan befolyásolhat a kontaktlencse viselése
- Allergiás reakciók, melyet kontaktlencse vált ki vagy súlyosbíthat
- Bármilyen meglévő szaruhártya fertőzés esetén
- Vörös, vagy irritált szem esetén
- Szemműtét után még be nem gyógyult szaruhártya esetén

FIGYELMEZTETÉSEK

A kontaktlencse-viselés során a következőket kell betartani.

- A kontaktlencse és lencsetisztító termékek használatából adódó elváltozások, beleértve a szaruhártya fekélyt, gyorsan kialakulhatnak és végleges látásvesztést okozhatnak. Ha bármilyen kellemetlenséget észlel a szemében, bő váladékozást, könnyezést, látásváltozást, szempirosodást, azonnal távolítsa el a lencsét és haladéktalanul keresse fel kontaktológusát.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI TANÁCSOK

- A kontaktlencsét óvatosan kezelje (ügyeljen arra, hogy ne ejtse le).
- Ne érjen a lencsékhez körömmel.
- A lencsét lehetőség szerint sminkelés előtt helyezze be. A kontaktlencse felhelyezése előtt és során ne használjon kozmetikumokat, mint testápolót, krémet, vagy sprayt.
- Mielőtt bármilyen szemgyógyszert használna, kérje ki kontaktológusa tanácsát.
- Ha nagyon száraznak érzi a kontaktlencsét a szemén, akkor csepegtessen néhány csepp (a kontaktológusa által javasolt) műkönnyet a szemébe és várjon, amíg a lencse újra szabadon mozog. Ha továbbra is kényelmetlennek érzi a kontaktlencsét, haladéktalanul lépjen kapcsolatba kontaktológusával.
- Kerülje az irritáló és mérgező gázokat és gőzöket a kontaktlencse viselése során.
- Ha bármilyen vegyi anyag kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét csapvízzel, távolítsa el a kontaktlencsét és rögtön forduljon kontaktológusához, vagy keresse fel bármely kórház baleseti osztályát.
- Kérdezze kontaktológusát a sportolást és vízi sportokat, valamint egyes foglalkozásokat illetően.
- A multifokális vagy multifokális torikus kontaktlencsék esetén az alkalmazkodási időszakban a lencsét csak megszokott helyzetekben hordja (nem vizuálisan megterhelő helyzetekben). Különösen kerülje a gépjármű vezetését az alkalmazkodási időszak alatt.
- A multifokális vagy multifokális torikus kontaktlencsék viselése közben a hirtelen bevilágító fény csökkent látásélességet okozhat. Amennyiben a lencse használatát kényelmetlennek érzi erős fényben, kérje ki kontaktológusa vagy szeméské tanácsát.
- Többszöri kontrolvizsgálat szükséges annak érdekében, hogy folyamatosan megőrizze szemének egészségét.
- Kérje kontaktológusa segítségét, ha cseréli lencséje típusát vagy paramétereit.
- Tájékoztassa kezelőorvosát arról, hogy kontaktlencsét visel.
- A kontaktlencsét szobahőmérsékleten tárolja. Ügyeljen, hogy a lencsék ne fagyjanak meg.
- Amennyiben a kontaktlencsét hosszabb ideig tárolni kívánja, kérje ki kontaktológusa vagy szeméské tanácsát.
- Ha a kontaktlencsék kiszáradnak a lencsetartóban, kérje ki a szeméské vagy a kontaktológusa tanácsát.
- Ne ossza meg a kontaktlencsét másokkal.

MELLÉKHATÁSOK

Ha az alábbi problémák valamelyike jelentkezik, azonnal távolítsa el a kontaktlencsét, vizsgálja meg őket, és győződjön meg arról, hogy semmilyen károsodást nem okoznak. Ha a kontaktlencsék nem sérültek, tisztítsa meg és fertőtlenítsen őket, mielőtt újra felhelyezi. Ha a probléma még mindig fennáll, távolítsa el a lencsét és forduljon kontaktológusához. Súlyos szemsérülés léphet fel, mint fertőzésre, szaruhártya fekélyre, szaruhártya eresedésre, szivárványhártya gyulladásra.

- Szemszúrás, égés, viszketés, vagy más szemfájdalom
- Folyamatos idegentest érzés, vagy más karcoló érzet
- Fokozott könnytermelés vagy váladékozás, szem kipirosodás, gyengébb, elmosódott látás, holdudvaros látás, fényérzékenység, vagy száraz szem

Ha a kontaktlencsénél súlyos események jelentkeznek, jelentsék azokat a meghatalmazott képviselőnek és/vagy a gyártónak, illetve az illetékes hatóságnak.

A KONTAKTLENCSÉK KEZELÉSE

- Mindig alaposan mossa meg, öblítse és szárítsa meg a kezét, mielőtt a kontaktlencséhez ér.
- Ne használja a kontaktlencsét, ha a steril csomagolás nyitott vagy sérült, illetve ha túllépte a lejárati dátumot.
- Annak érdekében, hogy elkerülje a kontaktlencsék felcserélését, mindig azonos oldallal kezdje a felhelyezést.


A zárófóliás bliszter felnyitása:

- Hajtsa fel a zárófóliát, hogy felnyissa a blisztert.
- Minden egyes tartóban egy darab kontaktlencse található a homorú felével felfelé.
- Óvatosan vegye ki a lencsét a tartóból, és vizsgálja meg, sérülésmentes-e, vagy nincs-e rajta idegentest.


A kontaktlencse felhelyezése:

A kontaktlencse felhelyezésének általános módszere a következő. Szükség esetén, további részletekért forduljon a kontaktológusához.


- Helyezze a kontaktlencse homorú felét felfelé a domináns keze mutatóujja hegyére.
- Ellenőrizze, hogy a lencse nincs-e kifordulva.
- A szabad keze középső ujjával húzza fel a felső szemhéját, a másik keze középső ujjával pedig, húzza le az alsó szemhéját.
- A mutató ujján lévő lencsét óvatosan helyezze a szemre, miközben egyenesen előre néz.
 - Ne nyomja a lencsét a szemére.
- Nézzon lefelé, engedje el a felső szemhéját, majd ezt követően az alsó szemhéját, és óvatosan pislogjon.
- Ugyanezt ismételje meg a másik lencsével is.
- Ha a kontaktlencse felhelyezését követően homályos a látása, az okok a következők lehetnek:
 - A kontaktlencsék nem helyezkedtek el a szaruhártya közepére:
 - Nézzon a tükörbe, és próbálja a szaruhártya közepére igazítani a lencsét a szélénél gyengéden érintve. Az alsó vagy felső szemhéj gyengéd érintésével igazítsa a lencsét a közepére.
 - Ha a kontaktlencsék a szaruhártya közepén helyezkednek el:
 - Távolítsa el a lencsét. A lehetséges okok a következők:
 - A lencse felszíne szennyezett.
 - A lencse a másik szemén van.
 - A lencsét kifordítva helyezte fel.
- Ha a fenti problémák megoldása után is homályos a látása, távolítsa el a kontaktlencsét és forduljon kontaktológusához.
- Amennyiben a kontaktlencse viselése során jelentős kellemetlenséget érez, azonnal távolítsa el a lencsét és forduljon a kontaktológusához.
- Tórikus kontaktlencse esetén helyezze a lencsét a szaruhártyára, úgy, hogy a jelzés alul és középen legyen. (Lásd az 1. ábrát)
- Multifokális kontaktlencsékhez (ADD HIGH) helyezze a lencsét a szaruhártyára a háromszög jelzéssel a halánték irányába. (Lásd a 2. ábrát)
- A multifokális tórikus kontaktlencsék jelzéssel rendelkeznek a lencse illeszkedésének ellenőrzésére. (Lásd a 3. ábrát)

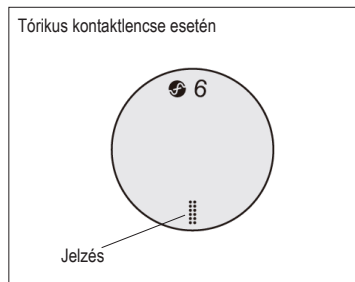

1. ábra

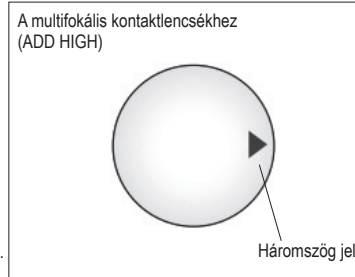

2. ábra

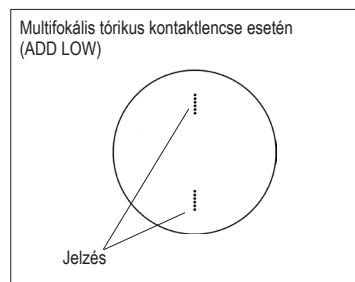

3. ábra

A kontaktlencsék eltávolítása:

- Tartsa egyenesen a fejét és nézzon felfelé.
- A szabad keze középső ujjával húzza lefelé az alsó szemhéját és helyezze domináns kéz mutatóujját a kontaktlencse alsó széléhez.
- Mutatóujjával csúsztassa le a lencsét a szemféhéjére.
- Gyengéden csiprintse mutató és hüvelykujja közé a lencsét.
- Távolítsa el a lencsét.
- Ugyanezt ismételje meg a másik lencsével is.

A KONTAKTLENCSEK ÁPOLÁSA

- Mindig olyan lencsetisztító termékeket használjon, amelyeket a szemésze vagy kontaktológusa ajánlott. Soha ne használjon merev gázáteresztő kontaktlencséknek szánt tisztító termékeket.
- Ne használjon csapvizet a kontaktlencsék és a lencsetartók tisztításához. A csapvíz használata növeli a bakteriális fertőzés kockázatát.
- Mindig használjon friss, nem lejárt lencsetisztító termékeket.
- Ne cserélje vagy keverje a lencsetisztító termékeket, hacsak a termék útmutatásaiban nem szerepel, vagy a szemésze, illetve a kontaktológusa nem ajánlja.
- Fertőtlenítés hővel nem ajánlott.
- Amikor nem használja a kontaktlencsét, helyezze azt a lencsetartóba úgy, hogy teljesen ellepje a tárolófolyadék.
- A lencsetartót tisztítsa meg és öblítse ki a tisztító termékekkel, és minden használat után hagyja a levegőn megszáradni. Rendszeres időközönként cserélje ki a lencsetartót.

A CSOMAGOLÁSON ÉS A ZÁRÓFÓLIÁS BLISZTEREN FELTÜNTETETT SZIMBÓLUMOK

SZIMBÓLUM						
DEFINÍCIÓ	Olvassa el a használati útmutatót		Tételkód	Lejárat dátum (Szavatossági idő)	Gyártás időpontja	
SZIMBÓLUM						
DEFINÍCIÓ	Gőzzel vagy száraz hővel sterilizált		Egyetlen steril akadályrendszer	Ne használja, ha a csomagolás sérült	Ne fagyassza le	
SZIMBÓLUM						
DEFINÍCIÓ	Orvosi eszköz		Egyedi eszközazonosító		EU importőr	
SZIMBÓLUM	DIA		BC	P	CYL	AXIS
DEFINÍCIÓ	Átmérő		Bázisgörbület	Dioptria (lencse erősség)	Dioptria (cilinder erősség)	Cilinder tengelye
SZIMBÓLUM	ADD		HIGH		LOW	
DEFINÍCIÓ	Dioptria (addíciós érték)		Nagy addíciós értékű kialakítás (+2.00 D)		Kis addíciós értékű kialakítás (+1.00 D)	

Gyártó: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

EC REP Meghatalmazott képviselő: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Kibocsátás dátuma 2023-09

©2023, Menicon Co., Ltd.

CE
0483

RDASRBPI008_hu