

Naudojimo instrukcija: „asmoofilcon A“ (40 % vandens) 2 savaičių arba mėnesiniai kontaktiniai lęšiai

Svarbu

- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykite šį dokumentą saugioje vietoje, kad prirėkūs galėtumėte pasižiūrėti.
- Visuomet laikykitės šiamo dokumente ir akių priežiūros specialisto ar gydytojo pateiktų nurodymų dėl tinkamo kontaktinių lęšių ir lęšių priežiūros gaminių naudojimo, įskaitant lęšių dėklus.

INFORMACIJA DĖL 2 SAVAIČIŲ KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ

Įvadas

„asmoofilcon A“ (40 % vandens) – tai mėlyno atspalvio minkšti silikono hidrogelio kontaktiniai lęšiai, kuriuos sudaro 40 % vandens.

Steriliūs lęšiai „asmoofilcon A“ (40 % vandens) yra supakuoti atskirai plėvele užsandarintoje plastikinėje talpyklėje ir panardinti į buferinį fiziologinį tirpalą.

Indikacijos

Lęšiai „asmoofilcon A“ (40 % vandens) yra skirti dieną ar iki 7 dienų nešioti bei refrakcinei ametropijai (trumparegystei, toliaregystei ir (arba) astigmatizmui) koreguoti, kai akys yra sveikos, neafakinės.

Naudojimo apribojimai

Nuvalykite ir dezinfekuokite išimtus kontaktinius lęšius, laikydamiesi akių priežiūros specialisto ar gydytojo rekomenduojamo valymo ir dezinfekavimo režimo. Kas 2 savaites kontaktinius lęšius pakeiskite naujais.

Dėl lęšių nešiojimo plano, atsižvelgdami į individualius poreikius, pasikonsultuokite su akių priežiūros specialistu ar gydytoju. Po nurodyto nešiojimo laikotarpio kontaktinius lęšius visada išmeskite. Kontaktinius lęšius nešiojant ilgiau nei nurodyta padidėja akių sutrikimų pavojus.

INFORMACIJA DĖL MĖNESINIŲ KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ

Įvadas

„asmoofilcon A“ (40 % vandens) – tai mėlyno atspalvio minkšti silikono hidrogelio kontaktiniai lęšiai, kuriuos sudaro 40 % vandens.

Steriliūs lęšiai „asmoofilcon A“ (40 % vandens) yra supakuoti atskirai plėvele užsandarintoje plastikinėje talpyklėje ir panardinti į buferinį fiziologinį tirpalą.

Indikacijos

Lęšiai „asmoofilcon A“ (40 % vandens) yra skirti nešioti dieną ir refrakcinei ametropijai (trumparegystei, toliaregystei ir (arba) astigmatizmui) ir (arba) senatvinei toliaregystei koreguoti, kai akys yra sveikos, neafakinės.

Naudojimo apribojimai

Nuvalykite ir dezinfekuokite išimtus kontaktinius lęšius, laikydamiesi akių priežiūros specialisto ar gydytojo rekomenduojamo valymo ir dezinfekavimo režimo. Kas mėnesį kontaktinius lęšius pakeiskite naujais.

Dėl lęšių nešiojimo plano, atsižvelgdami į individualius poreikius, pasikonsultuokite su akių priežiūros specialistu ar gydytoju. Po nurodyto nešiojimo laikotarpio kontaktinius lęšius visada išmeskite. Kontaktinius lęšius nešiojant ilgiau nei nurodyta padidėja akių sutrikimų pavojus.

KONTRAINDIKACIJOS

Nenešioti kontaktinių lęšių, jeigu yra bent viena iš šių būklių.

- Akių priekinės kameros ūminis ir poūmis uždegimas ar infekcija.
- Bet kokia liga, sužalojimas ar nukrypimas nuo normos, turintis poveikio ragenai, junginei ar akių vokams.
- Sunkus ašarų sekrecijos nepakankamumas (sausos akys).
- Ragenos hipestezija (sumažėjęs ragenos jautrumas).
- Bet kokia sisteminė liga, kuri gali turėti neigiamo poveikio akims nešiojant kontaktinius lęšius.
- Alerginės reakcijos, kurias gali sukelti arba sustiprinti nešiojami kontaktiniai lęšiai.
- Bet kokia aktyvi ragenos infekcija.
- Paraudusios arba sudirgusios akys.
- Nevisiškai išgyjusi ragenos po akių operacijos.

ĮSPĖJIMAI

Atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus, susijusius su kontaktinių lęšių nešiojimu.

- Greitai gali atsirasti su lęšių nešiojimu ir lęšių priežiūros gaminių naudojimu susijusių akių problemų, pavyzdžiui, ragenos opa, o tai gali lemti regėjimo netekimą. Jeigu jaučiate nepatogumų akyse, pernelyg ašarojate, pasikeičia regėjimas, akys parausta ar susiduria su kitomis problemomis, skubiai išimkite lęšius ir kreipkitės į akių priežiūros specialistą ar gydytoją.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atsargiai tvarkykite kontaktinius lęšius (būkite atsargūs, kad jų nenumestumėte).
- Nelieskite kontaktinių lęšių savo nagais.
- Kontaktinius lęšius įsidėkite, prieš naudodami kosmetikos priemones. Nenaudokite kosmetikos priemonių, losjonų, kremų ar purškiklių, tvarkydami kontaktinius lęšius.
- Prieš naudodami bet kokius vaistus akims, pasitarkite su akių priežiūros specialistu ar gydytoju.
- Jeigu jaučiate, kad kontaktiniai lęšiai yra sausi akyse, tiesiai į akis įlašinkite kelis tepamojo ar drėkinamojo tirpalo lašus (rekomenduotus akių priežiūros specialisto ar gydytojo) ir palaukite, kol lęšiai galės laisvai judėti akyse, prieš juos išimdami. Jeigu vis tiek jaučiate nepatogumą, skubiai kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą ar gydytoją.
- Kai nešiojate kontaktinius lęšius, venkite visų kenksmingų ar dirginančių garų ir dūmų.
- Jeigu į akis patenka cheminių medžiagų, skubiai plaukite akis vandeniu iš čiaupo, išimkite kontaktinius lęšius ir kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą ar gydytoją arba apsilankykite ligoninės greitosios pagalbos skyriuje.
- Kaip nešioti kontaktinius lęšius sportuojant ar užsiimant su vandeniu susijusia veikla bei dirbant specifinius darbus, pasitarkite su akių priežiūros specialistu ar gydytoju.
- Naudojant daugiažidinius arba daugiažidinius toroidinius kontaktinius lęšius, adaptacijos laikotarpiu rekomenduojama juos nešioti tik esant pažįstamoms situacijoms (nereikalaujančioms itin gero regėjimo). Adaptacijos laikotarpiu ypač venkite vairuoti motorinę transporto priemonę.
- Netikėta šviesa nešiojant daugiažidinius arba daugiažidinius toroidinius kontaktinius lęšius gali lemti prastesnį vaizdo aštrumą. Jei esant ryškiam apšvietimui nešiodami kontaktinius lęšius jaučiatės nepatogiai, pasitarkite su akių priežiūros specialistu ar gydytoju.
- Būtinai reguliarius vizitus pas akių gydytoją, kad būtų užtikrinta nuolatinė akių sveikata.
- Jeigu norite keisti lęšių rūšį ar parametrus, pasitarkite su savo akių priežiūros specialistu ar gydytoju.
- Informuokite savo gydytoją, kad nešiojate kontaktinius lęšius.
- Kontaktinius lęšius laikykite kambario temperatūroje. Saugokite, kad lęšiai neužšaltų.
- Jei kontaktinius lęšius reikia laikyti ilgą laikotarpį, pasitarkite su akių priežiūros specialistu ar gydytoju.
- Jei lęšių dėklu laikomi kontaktiniai lęšiai išdžiūvo, pasitarkite su akių priežiūros specialistu ar gydytoju.
- Nesidalykite kontaktinių lęšių su kitais žmonėmis.

NEPAGEIDAUJAMOS REAKCIJOS

Kilus bet kuriai iš šių problemų, nedelsdami išimkite kontaktinius lęšius ir juos patikrinkite, kad įsitikintumėte, jog jie nepažeisti. Jei kontaktiniai lęšiai nepažeisti, prieš nešiodami, juos nuvalykite ir dezinfekuokite. Jeigu problema tęsiasi, išimkite lęšius ir kreipkitės pagalbos į medikus. Gali atsirasti sunkus akių pažeidimas, pavyzdžiui, infekcija, ragenos opa, neovaskularizacija ir iritacija.

- Akių gėlimas, deginimas, niežėjimas ar kitoks akių skausmas
- Nuolatinis svetimkūnio ar brėžio pojūtis
- Pernelyg didelis ašarojimas, neįprastos išskyros iš akių, paraudimas, sumažėjęs regėjimo aštrumas, matymas lyg per miglą, halas, fotofobija arba sausos akys

Jei nešiojant kontaktinius lęšius kyla rimtų incidentų, apie juos praneškite įgaliojajam atstovui ir (arba) gamintojui bei kompetentingai institucijai.

KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ TVARKYMAS

- Prieš tvarkydami kontaktinius lęšius, visada nusiplaukite, nuskalaukite ir nusišluostykite rankas.
- Nenešioti kontaktinių lęšių, jeigu sterili pakuotė buvo atidaryta ar pažeista arba praėjo jų galiojimo data.
- Visada tvarkykite kairįjį ir dešinįjį kontaktinius lęšius ta pačia seka, kad jų nesumažytumėte.

Plėvele užsandarintos plastikinės talpyklės atidarymas:

1. Nuimkite nuo talpyklės plėvelę, kad atidarytumėte pakuotę.
2. Suraskite vieną talpyklėje įdėtą kontaktinį lęšį išgaubta puse į viršų.
3. Atsargiai išimkite lęšį iš talpyklės ir patikrinkite, ar jis nepažeistas ir ar ant jo nėra svetimkūnių.

Kontaktinių lęšių įdėjimas:

Kontaktinių lęšių įdėjimo procesas yra aprašytas toliau. Išsamesnės informacijos, jeigu reikia, teiraukitės savo akių priežiūros specialisto arba gydytojo.

1. Uždėkite kontaktinį lęšį ant savo pagrindinės rankos smiliaus galiuko išgaubta puse, nukreipta į viršų.
 2. Patikrinkite lęšio profilį, kad įsitikintumėte, ar jis neišverstas į kitą pusę.
 3. Plačiai atmerkite vokus, prilaikydami viršutinį voką savo nepagrindinės rankos smiliu, o apatinį voką – pagrindinės rankos viduriniu pirštu.
 4. Lėtai pakelkite lęšį iki akies, žiūrėdami tiesiai į priekį, ir švelniai uždėkite jį ant ragenos.
 - Nespauskite lęšio prie akies.
 5. Žiūrėdami žemyn, pirmiausia atleiskite viršutinį voką, o po to – apatinį ir švelniai pamirskėkite.
 6. Pakartokite šį procesą su kitu lęšiu.
- Jeigu įsidėjus kontaktinius lęšius regėjimas tampa miglotas:
- Jeigu kontaktiniai lęšiai yra ne ant ragenos centro:
 - Žiūrėkite į veidrodį ir švelniai judinkite lęšio kraštą, kad uždėtumėte jį ant ragenos, atmerkdami akį. Pirštu prispauskite viršutinį ar apatinį voką, kol lęšis bus uždėtas ant ragenos vidurio.
 - Jeigu kontaktiniai lęšiai yra ant ragenos centro:
 - Išimkite lęšius. Galimos šios priežastys:
 - Nešvarus lęšio paviršius.
 - Lęšiai sudėti klaidingai, ne į tas akis.
 - Lęšiai į akis buvo įdėti išverstai į kitą pusę.
- Jeigu pašalinę minėtas problemas vis dar matote miglotai, išimkite kontaktinius lęšius ir kreipkitės į akių priežiūros specialistą ar gydytoją.
- Jeigu nešiodami kontaktinius lęšius jaučiate didelį nepatogumą, nedelsdami išimkite kontaktinius lęšius ir kreipkitės į savo akių priežiūros specialistą ar gydytoją.
- Toroidinius kontaktinius lęšius dėkite ant ragenos taip, kad orientyrinė žyma būtų nukreipta žemyn. (Žr. 1 pav.).
- Kai naudojate daugiažidinius kontaktinius lęšius (ADD HIGH), uždėkite juos ant ragenos taip, kad trikampė žymė būtų nukreipta į smilkinkaulio pusę. (Žr. 2 pav.).
- Ant daugiažidinių toroidinių kontaktinių lęšių yra orientyrinės žymos, pagal kurias galima patikrinti lęšio įdėjimo tinkamumą. (Žr. 3 pav.).


Kontaktinių lęšių išėmimas:

1. Žiūrėkite į viršų ir galvą laikykite tiesiai.
2. Savo nepagrindinės rankos viduriniu pirštu patempkite apatinį voką žemyn, o pagrindinės rankos smiliu uždėkite ant kontaktinio lęšio apatinio krašto.
3. Pastumkite lęšį žemyn, į apatinę baltą akies dalį.
4. Švelniai suimkite lęšį pagrindinės rankos nykščiu ir smiliu.
5. Išimkite lęšį.
6. Pakartokite šį procesą su kitu lęšiu.

KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ PRIEŽIŪRA


- Visada naudokite akių priežiūros specialisto ar gydytojo rekomenduojamus lęšių priežiūros gaminius. Niekada nenaudokite dujomis laidiems standiesiems kontaktiniams lęšiams skirtų priežiūros gaminių.
- Kontaktinių lęšių ir lęšių dėkliukų priežiūrai nenaudokite čiaupo vandens. Naudojant čiaupo vandenį padidėja mikrobų sukeltos infekcijos pavojus.
- Visada naudokite šviežius nesibaigusio galiojimo lęšių priežiūros gaminius.
- Nekeiskite ar nemaišykite lęšių priežiūros gaminių, jei tai nėra nurodyta gaminio instrukcijoje ar nerekomendavo akių priežiūros specialistas ar gydytojas.
- Dezinfekuoti šiluma nerekomenduojama.
- Nenaudojamus kontaktinius lęšius laikykite visiškai panardintus į laikymo tirpalą.
- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite ir praskalaukite lęšių dėkliuką priežiūros gaminiiais, tada palikite išdžiūti ore. Reguliariai keiskite lęšių dėkliukus.

Skirta toroidiniams kontaktiniams lęšiams

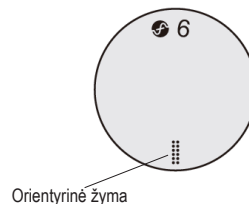


1 pav.

Naudojant daugiažidinius kontaktinius lęšius (ADD HIGH)

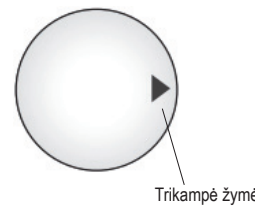

2 pav.

Skirta daugiažidiniams toroidiniams kontaktiniams lęšiams (ADD LOW)

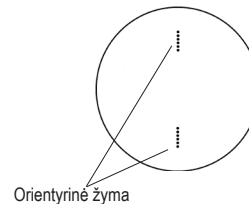

3 pav.

ANT PAKUOTĖS IR PLĖVELE UŽSANDARINTOS PLASTIKINĖS TALPYKLĖS NAUDOJAMI SIMBOLIAI

SIMBOLIS					
APIBRĖŽIMAS	Žiūrėti naudojimo taisykles	Partijos kodas	Naudoti iki (Tinkamumo terminas)	Pagaminimo data	
SIMBOLIS					
APIBRĖŽIMAS	Sterilizuota garais arba sausąja šiluma	Viengubo sterilaus barjero sistema	Nenaudokite, jei pakuotė pažeista	Neužšaldykite	
SIMBOLIS					
APIBRĖŽIMAS	Medicinos įtaisas	Unikali įtaiso identifikacija	ES importuotojas		
SIMBOLIS	DIA	BC	P	CYL	AXIS
APIBRĖŽIMAS	Skersmuo	Bazinė kreivė	Dioptrijos (lęšio laužiamoji geba)	Dioptrijos (cilindro laužiamoji geba)	Cilindro ašis
SIMBOLIS	ADD		HIGH		LOW
APIBRĖŽIMAS	Dioptrijos (pridėtinė laužiamoji geba)		Didelės pridėtinės laužiamosios gebos dizainas (+2,00 D)		Mažos pridėtinės laužiamosios gebos dizainas (+1,00 D)

Gamintojas: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

EC REP | galiojantis atstovas: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Išleidimo data 2023-09

©2023, Menicon Co., Ltd.

CE
0483

RDASRBPI008_It