

Bruksanvisning: asmoofilcon A (40 % vatten) för byte av 2-veckors- eller månadslinser

Obs

- Läs följande instruktioner noggrant före användning och förvara detta informationsblad på en säker plats för framtida bruk.
- Följ alltid instruktionerna i detta informationsblad och de instruktioner som du har fått av din optiker för lämplig användning av kontaktlinser och rengöringsprodukter inklusive linsetui.

FÖR BYTE AV 2-VECKORSLINSER

Inledning

asmoofilcon A (40 % vatten) är en mjuk blå färgad silikonhydrogel kontaktlins med 40 % vatteninnehåll.

Den sterila asmoofilcon A (40 % vatten) är nedsänkt i en buffrad saltlösning och individuellt förpackad i en folietillsluten plastbehållare.

Indikationer

asmoofilcon A (40 % vatten) är avsedd för dagligt bruk eller för bärande upp till 7 dagar och korrigering av brytningsametropi (närsynthet, översynthet och/eller astigmatism) i icke-afakiska sjukdomsfria ögon.

Begränsningar för användning

Rengör och desinficera kontaktlinserna efter att du tagit ut dem genom att använda rengörings och desinficerings metoden som rekommenderats av din optiker. Byt ut kontaktlinserna varannan vecka med ett nytt fräscht par.

Rådfråga din optiker gällande schema för byte av kontaktlinser baserat på dina individuella behov. Kassera alltid kontaktlinserna efter den instruerade bärperioden. Att bära kontaktlinserna under en längre period än vad instruerat kan öka risken för ögonproblem.

FÖR BYTE AV MÅNADSLINSER

Inledning

asmoofilcon A (40 % vatten) är en mjuk blå färgad silikonhydrogel kontaktlins med 40 % vatteninnehåll.

Den sterila asmoofilcon A (40 % vatten) är nedsänkt i en buffrad saltlösning och individuellt förpackad i en folietillsluten plastbehållare.

Indikationer

asmoofilcon A (40 % vatten) är avsedd för dagligt bruk och korrigering av brytningsametropi (närsynthet, översynthet och/eller astigmatism) och/eller ålderssynthet i icke-afakiska sjukdomsfria ögon.

Begränsningar för användning

Rengör och desinficera kontaktlinserna efter att du tagit ut dem genom att använda rengörings och desinficerings metoden som rekommenderats av din optiker. Byt ut kontaktlinserna varje månad med ett nytt fräscht par.

Rådfråga din optiker gällande schema för byte av kontaktlinser baserat på dina individuella behov. Kassera alltid kontaktlinserna efter den instruerade bärperioden. Att bära kontaktlinserna under en längre period än vad instruerat kan öka risken för ögonproblem.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte kontaktlinserna om du har något av följande tillstånd:

- Akut och subakut inflammation eller infektion av den främre kammaren av ögat
- Någon sjukdom, skada eller abnormitet som påverkar hornhinnan, bindhinnan eller ögonlocken
- Gravt otillräcklig tårproduktion (torra ögon)
- Korneal hypestesi (reducerad hornhinnrekänslighet)
- Någon systematisk sjukdom som negativt kan påverka ögonen genom att använda kontaktlinser
- Allergiska reaktioner som kan orsakas eller förstärkas genom att använda kontaktlinser
- Någon aktiv hornhinneinfektion
- Röda eller irriterade ögon
- Ofullständig hornhinne-läkning efter ögonoperation

VARNING

Du bör informeras om följande varningar gällande användning av kontaktlinser.

- Ögonproblem som t.ex. hornhinnesår kan uppstå vid användning av kontaktlinser samt rengöringsprodukter, och de kan uppstå snabbt och leda till förlust av synen. Om du upplever obehag i ögonen, överdrivet tårflöde, syn förändringar, röda ögon eller andra problem bör du genast ta ut linserna och rådfråga din optiker.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Hantera kontaktlinserna varsamt (var försiktig så att du inte tappar dem).
- Rör inte kontaktlinserna med dina naglar.
- Sätt in kontaktlinserna före du sätter på kosmetika. Applicera inte kosmetika, lotioner, krämer eller sprayer vid hantering av kontaktlinserna.
- Rådfråga din optiker före du använder någon medicin i ögonen.
- Om kontaktlinserna känns torra när de sitter i kan du applicera några droppar av den smörjande och återfuktande lösningen (rekommenderad av din optiker) direkt i ögonen och vänta tills linserna rör sig fritt innan du tar ut dem. Om det fortfarande känns obehagligt, kontakta genast din optiker.
- Undvik alla skadliga eller irriterande ångor när du bär kontaktlinserna.
- Om några kemikalier skvåts i ögonen, spola genast med kranvatten. Ta genast ut kontaktlinserna och rådfråga din optiker, eller besök ett sjukhus.
- Rådfråga din optiker för instruktioner gällande användning av kontaktlinser vid utövande av sport och vattenaktiviteter eller särskilda yrken.
- Med multifokala eller multifokala toriska kontaktlinser rekommenderas det att du endast använder linserna i bekanta situationer (i icke-visuellt ansträngande situationer) under anpassningsperioden. Undvik i synnerhet att köra motorfordon under anpassningsperioden.
- Plötsligt ljus medan du använder de multifokala eller multifokala toriska kontaktlinserna kan orsaka minskad synskärpa. Rådfråga din optiker om du känner obehag när du använder linserna i starka ljus.
- Uppföljningsbesök är nödvändigt för att försäkra fortsatt god ögonhälsa.
- Rådfråga din optiker om du önskar ändra linstyp eller parametrar.
- Informera din läkare att du använder kontaktlinser.
- Förvara kontaktlinserna i rumstemperatur. Undvik frysning.
- Rådfråga din optiker om du behöver förvara kontaktlinserna under en längre period.
- Rådfråga din optiker eller läkare om kontaktlinserna blir uttorkade i ett linsetui.
- Kontaktlinserna ska inte delas med andra personer.

BIVERKNINGAR

Om något av följande problem uppstår ta då omedelbart ut kontaktlinserna och kontrollera så att de är fria från skador. Om kontaktlinserna är fria från skador ta då och rengör och desinficera linserna igen före användning. Om problemen fortsätter ta då ut linserna och sök omedelbart behandling. Allvarlig ögonskada kan resultera i inflammation, hornhinnesår, neovaskularisation och regnbågshinneinflammation.

- Stickning i ögonen, brännande känsla, klåda eller någon annan slags ögonsmärta
- Kontinuerlig känsla av främmande föremål eller skrapning
- Överdrivet tårflöde, ovanlig ögonsekretion, rodnad, minskad synskärpa, suddig syn, ljusfläckar, fotofobi eller torra ögon

Om några allvarliga incidenter inträffar med kontaktlinserna ska detta rapporteras till auktoriserad representant och/eller tillverkaren, samt behörig myndighet.

LINSHANTERING

- Tvätta, skölj och torka alltid dina händer noggrant före du handskas med kontaktlinserna.
- Använd inte kontaktlinserna om den sterila förpackningen har öppnats, skadats eller om utgångsdatumet har passerat.
- Hantera alltid den vänstra och högra kontaktlinsen i samma ordning för att undvika förväxling.

Öppning av den folietillslutna plastbehållaren:

1. Avlägsna folien på behållaren för att öppna förpackningen.
2. Hitta kontaktlinserna i förpackningen med den konkava sidan uppåt.
3. Ta varsamt upp linsen från förpackningen och se till att den är fri från skada eller främmande föremål.

Sätta in kontaktlinser:

Nedan kan du finna en generell beskrivning över tillvägagångssätt för att sätta in kontaktlinserna. Rådfråga din optiker för mer detaljerad information om nödvändigt.

1. Placera kontaktlinserna på spetsen av pekfingeret av din dominerande hand, med den konkava sidan uppåt.
 2. Kontrollera så att linsen inte är vänd ut och in genom att granska den från sidan.
 3. Håll dina ögonlock brett isär genom att dra det övre ögonlocket med långfingeret med din icke-dominanta hand och det nedre ögonlocket med långfingeret med din dominerande hand.
 4. För långsamt upp linsen mot ögat samtidigt som du tittar rakt fram, och placera försiktigt linsen på hornhinnan.
 - Tryck inte linsen mot ögat.
 5. Titta ner, släpp först det övre ögonlocket och sedan det nedre och blinka försiktigt.
 6. Upprepa samma procedur för den andra linsen.
- Om din syn är suddig efter insättning av kontaktlinserna:
 - Om kontaktlinserna inte är centrerade på hornhinnan:
 - Titta i spegeln och manipulera försiktigt kanten av linsen för att flytta den mot hornhinnan medan du har ögonen öppna. Tryck med fingret på kanten av det övre eller nedre locket tills linsen är centrerad på hornhinnan.
 - Om kontaktlinserna är centrerade på hornhinnan:
 - Ta ut linserna. Möjliga orsaker är följande:
 - Linsytan är smutsig.
 - Linsen är på fel öga.
 - Linsen har satts ut och in på ögat.
 - Om din syn fortfarande är suddig efter att du har kontrollerat ovanstående problem, ta då ut kontaktlinserna och rådfråga din optiker.
 - Om du känner betydlig obehag när du använder kontaktlinserna ta då genast ut linserna och rådfråga din optiker.
 - För toriska kontaktlinser, sätt linserna på hornhinnan med hjälp av vägledningsmärket pekandes neråt. (Se Bild 1.)
 - För multifokala kontaktlinser (ADD HIGH), sätt linserna på hornhinnan med hjälp av triangelmärket pekandes mot tinningens sida. (Se Bild 2.)
 - De multifokala toriska kontaktlinserna har vägledningsmärken som visar om linsen sitter rätt. (Se Bild 3.)

Ta ut kontaktlinserna:

1. Titta uppåt medan du håller huvudet rakt.
2. Dra ner det nedre ögonlocket med långfingeret med din icke-dominanta hand och placera pekfingeret med din dominerande hand på den nedre kanten av kontaktlinserna.
3. Skjut ner linsen till den nedre vita delen av ögat.
4. Nyp försiktigt linsen mellan tummen och pekfingeret med din dominerande hand.
5. Ta ut linsen.
6. Upprepa samma procedur för den andra linsen.

RENGÖRING AV KONTAKTLINSENA

- Använd alltid rengöringsprodukter som rekommenderas av din optiker. Använd aldrig rengöringsprodukter för styva gaspermeabla kontaktlinser.
- Använd inte kranvatten för rengöring av kontaktlinserna eller linsetuget. Användning av kranvatten ökar risken för mikrobiell infektion.
- Använd alltid fräscha rengöringsprodukter som är inom utgångsdatumet.
- Alternera eller blanda inte rengöringsprodukter för linserna såvida det inte indikeras i bruksanvisningen eller rekommenderas av din optiker.
- Värmedesinfektion rekommenderas inte.
- Förvara kontaktlinserna helt nedsänkta i linsvätska när de inte används.
- Rengör och skölj linsetuget med rengöringsprodukter och låt det lufttorka efter varje användning. Byt ut linsetuget med regelbundna mellanrum.

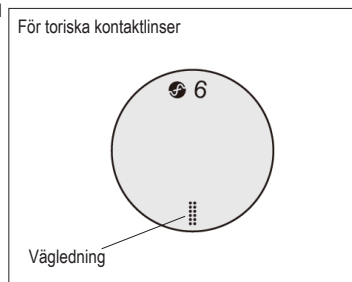


Bild 1

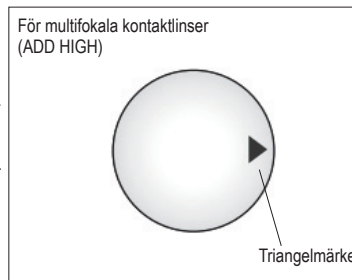


Bild 2

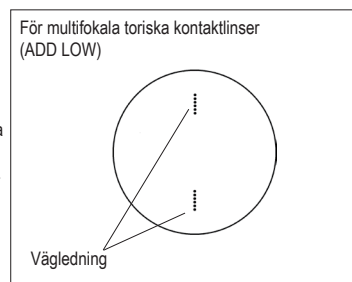


Bild 3

SYMBOLER SOM ANVÄNDS PÅ FÖRPACKNINGEN OCH DEN FOLIETILLSLUTNA PLASTBEHÅLLAREN

SYMBOL					
DEFINITION	Konsultera bruksanvisningen	Satsnummer	Använd före (Utgångsdatum)	Datum för tillverkning	
SYMBOL					
DEFINITION	Steriliserad med ånga eller torr värme	Enkelt sterilt barriärsystem	Använd inte om förpackningen har skadats	Frys inte	
SYMBOL					
DEFINITION	Medicinteknisk produkt	Unik enhetsidentifiering	EU-importör		
SYMBOL	DIA	BC	P	CYL	AXIS
DEFINITION	Diameter	Baskurva	Dioptri (Linsstyrka)	Dioptri (Cylinderstyrka)	Cylinderaxel
SYMBOL	ADD	HIGH		LOW	
DEFINITION	Dioptri (tilläggsstyrka)	Design för hög tilläggsstyrka (+2.00 D)		Design för låg tilläggsstyrka (+1.00 D)	

Tillverkare: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

EC REP Auktoriserad representant: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Utgivningsdatum 2023-09

©2023, Menicon Co., Ltd.

CE
0483

RDASRBPI008_sv