

Инструкции за употреба: Еднодневни контактни лещи – midafilcon A (56% вода)/hioxifilcon A (57% вода)

Важно

- Преди употреба прочетете внимателно следващите инструкции и запазете този документ на сигурно място за бъдещи справки.
- Винаги спазвайте инструкциите в този документ и указанията на своя очен специалист относно правилната употреба на контактните лещи.

ВЪВЕДЕНИЕ

- midafilcon A (56% вода) са меки контактни лещи от силиконов хидрогел, със син цвят, с водно съдържание 56%. Всяка стерилна контактна леща midafilcon A (56% вода) е отделно опакована в запечатан с фолио пластмасов контейнер и потопена в буферизиран физиологичен разтвор.
- hioxifilcon A (57% вода) са меки контактни лещи от хидрогел, със син цвят, с водно съдържание 57%. Всяка стерилна контактна леща hioxifilcon A (57% вода) е отделно опакована в плоска опаковка и е потопена в буферизиран физиологичен разтвор.

ПОКАЗАНИЯ

- Контактните лещи midafilcon A (56% вода) са предназначени само за еднократна ежедневна употреба за корекция при лица с рефрактивна аметропия (миопия, хиперопия и/или астигматизъм) и/или пресбиопия (без астигматизъм) без афакия и без очни заболявания.
- Контактните лещи hioxifilcon A (57% вода) са предназначени само за еднократна ежедневна употреба за корекция при лица с рефрактивна аметропия (миопия, хиперопия и/или астигматизъм) и/или пресбиопия (без астигматизъм) без афакия и без очни заболявания.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

Сваляйте и изхвърляйте контактните лещи в края на всеки ден и ги заменяйте с нови всяка сутрин. Повторното използване на контактни лещи за еднократна употреба увеличава риска от проблеми с очите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не използвайте контактните лещи при някои от следните състояния.

- Акутно или субакутно възпаление или инфекция на предната камера на окото
- Заболявания, наранявания или аномалии, които засягат роговицата, конюнктивата или клепачите
- Тежка недостатъчност на слъзен секрет (сухи очи)
- Хипестезия на роговицата (намалена чувствителност на роговицата)
- Системни заболявания, които могат да повлияят неблагоприятно на окото при носене на контактните лещи
- Алергични реакции, които могат да бъдат предизвикани или усилены от носенето на контактните лещи
- Активна инфекция на роговицата
- Зачервени или възпалени очи
- Непълно заздравяване на роговицата след очна операция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Необходимо е да сте наясно със следните предупреждения, свързани с използването на контактни лещи.

- Проблемите с очите, произтичащи от използването на контактни лещи, например язви на роговицата, могат да се развият бързо и да доведат до загуба на зрението. Ако почувствате дискомфорт в очите, обилно съзлене, промени в зрението, зачервяване на очите или други проблеми, незабавно трябва да свалите лещите и своевременно да се консултирате със своя очен специалист.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Бъдете внимателни, когато боравите с контактните лещи (внимавайте да не ги изпуснете).
- Не докосвайте контактните лещи с нокти.
- Поставете контактните лещи, преди да нанасяте козметика. Не нанасяйте козметични продукти, лосиони, кремове или спрейове, докато боравите с контактните лещи.
- Консултирайте се със своя очен специалист, преди да използвате медикаменти за очи.
- Ако почувствате, че контактните лещи в очите Ви са сухи, поставете няколко капки лубрикантен или овлажняващ разтвор (препоръчан от очния Ви специалист) директно в очите и изчакайте, докато лещите започнат да се движат свободно, преди да ги свалите. Ако чувството на дискомфорт продължи, незабавно се консултирайте със своя очен специалист.
- Избягвайте всякакви вредни или дразнещи изпарения и дим, когато носите контактните лещи.
- В случай на напръскване на очите с химикал промийте очите незабавно с чешмяна вода, свалете контактните лещи и се свържете със своя очен специалист или незабавно посетете отделение за спешна помощ.
- Консултирайте се със своя очен специалист относно използването на контактните лещи по време на спортни дейности или дейности във вода, или при упражняване на конкретни професии.
- Препоръчва се по време на периода на адаптация мултифокалните контактни лещи да се носят само в познати ситуации (ситуации, неизискващи повишено зрително внимание). По-специално по време на периода на адаптация трябва да се избягва каране на моторно превозно средство.
- Внезапната светлина при носенето на мултифокалните контактни лещи може да доведе до намалена зрителна острота. Консултирайте се със своя очен специалист, ако усещате дискомфорт при носене на лещите при ярка светлина.
- При еднократните контактни лещи не е необходимо почистване или дезинфекциране. Винаги изхвърляйте използваните контактни лещи. Поддържайте в готовност лещи за смяна или очила, в случай че се наложи да свалите лещите през деня.
- Не спете с контактните лещи.
- Контролните прегледи са необходими за постоянно подsigуряване на здравето на очите Ви.
- Консултирайте се със своя очен специалист, ако искате да смените типа или параметрите на лещите.
- Уведомете лекаря си, че носите контактни лещи.
- Съхранявайте контактните лещи при стайна температура. Не позволявайте лещите да замръзнат.
- Не споделяйте контактните си лещи с други хора.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

При възникване на някой от проблемите по-долу незабавно свалете контактните лещи и ги заменете с нови. Ако проблемът продължава, свалете лещите и незабавно потърсете медицинска помощ. Може да възникне сериозно увреждане на очите, като инфекция, язва на роговицата, неоваскуларизация и ирит.

- Смъдени, парене, сърбеж или друга болка в очите
- Непрекъснато усещане за чуждо тяло или драскане
- Обилно съзлене, необичайни секрети от очите, зачервяване, намалена острота на зрението, замъглено зрение, кръгове, фотофобия или сухи очи

Ако възникнат сериозни инциденти при използването на контактните лещи, съобщете ги на упълномощен представител и/или производителя и на компетентните органи.

БОРАВЕНЕ С КОНТАКТНИТЕ ЛЕЩИ

- Винаги измивайте, изплаквайте и подсушавайте ръцете си щателно, преди да боравите с контактните лещи.
- Не използвайте контактните лещи, ако стерилната опаковка е била отворена или повредена, или ако срокът на годност е изтекъл.
- Винаги поставяйте лявата и дясната контактни лещи в една и съща последователност, за да избегнете объркването им.


Само за плоската опаковка:

- Не прилагайте прекомерна сила върху плоските опаковки за продължителен период от време.
- Сложете контактната леща върху диска незабавно след отварянето на плоската опаковка.

Отваряне на запечатания с фолио пластмасов контейнер:

1. Хванете лентата на блистера, както е показано на илюстрацията, и отделете един контейнер. (Вижте фиг. 1.)
2. Отлепете фолиото от контейнера, за да отворите опаковката. (Вижте фиг. 2.)
3. В контейнера ще намерите една контактна леща с изпъкналата страна нагоре.

4. Извадете внимателно лещата от контейнера и я прегледайте, за да се уверите, че по нея няма драскотини или чужди тела. (Вижте фиг. 2.)

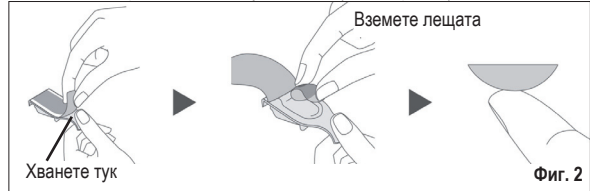

Отваряне на плоската опаковка:

1. Махнете горния слой на плоската опаковка.
2. В нея ще намерите една контактна леща с изпъкналата страна нагоре.
3. Извадете внимателно лещата от плоската опаковка и я прегледайте, за да се уверите, че по нея няма драскотини или чужди тела.

Поставяне на контактните лещи:

По-долу е описана общата процедура за поставяне на контактните лещи. Ако е необходимо, консултирайте се с Вашия очен специалист за повече подробности.

1. Поставете контактната леща на върха на показалеца на доминантната си ръка, с вдлъбнатата страна нагоре.
2. Проверете профила на лещата, за да сте сигурни, че не е обръната наопаки.
3. Задръжте клепачите си широко отворени, като придърпате горния клепач с показалеца на недоминантната си ръка, а долния клепач – със средния пръст на доминантната си ръка.
4. Бавно поднесете лещата нагоре към окото, като гледате право напред, и я поставете внимателно върху роговицата.
 - Не натискайте лещата към окото.
5. Погледнете надолу, освободете първо горния клепач, а след това и долния, и мигайте внимателно.
6. Повторете тази процедура с другата леща.
 - Ако след поставянето на контактните лещи зрението Ви е замъглено:
 - Ако контактните лещи не са центрирани върху роговицата:
 - Погледнете в огледалото и внимателно придвижете ръба на лещата, докато сте с отворени очи, за да я преместите върху роговицата. Използвайте натиск с пръст върху ръба на горния или долния клепач, докато лещата застане в центъра на роговицата.
 - Ако контактните лещи са центрирани върху роговицата:
 - Свалете лещите. Възможните причини са следните:
 - Повърхността на лещата е замърсена.
 - Лещата е в погрешното око.
 - Лещата е поставена наопаки в окото.
 - Ако зрението Ви продължава да е замъглено, след като отстраните горепосочените проблеми, свалете контактните лещи и се консултирайте с Вашия очен специалист.
 - Ако чувствате значителен дискомфорт при носене на контактни лещи, свалете ги незабавно и се консултирайте с Вашия очен специалист.
 - Торичните контактни лещи имат знак за ориентиране. Предназначен е за потвърждаване на правилната позиция на поставяне. (Вижте Фиг. 3 и Фиг. 4.)



Сваляне на контактните лещи:

1. Дръжте главата изправена и погледнете нагоре.
2. Дръпнете надолу долния клепач със средния пръст на недоминантната си ръка и поставете показалеца на доминантната си ръка върху долния ръб на контактната леща.
3. Плъзнете лещата надолу към бялата част на окото.
4. Внимателно хванете лещата с палеца и показалеца на доминантната си ръка.
5. Извадете лещата.
6. Повторете тази процедура с другата леща.

СИМВОЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ НА КУТИЯТА, ЗАПЕЧАТАНИЯ С ФОЛИО ПЛАСТМАСОВ КОНТЕЙНЕР И ПЛОСКАТА ОПАКОВКА

СИМВОЛ			LOT		
ДЕФИНИЦИЯ	Прочети инструкцията за използване	Да не се използва повторно	Номер на партидата	Да се използва преди дата (Срок на годност)	Дата на производство
СИМВОЛ	STERILE				
ДЕФИНИЦИЯ	Стерилизиране с използване на пара или суха топлина	Система с единична стерилна бариера	Да не се използва, ако опаковката е нарушена	Да не се замразява	
СИМВОЛ	MD	UDI			
ДЕФИНИЦИЯ	Медицинско изделие	Уникален идентификатор на изделията	Вносител в ЕС		
СИМВОЛ	DIA	BC	P	CYL	AX/AXIS
ДЕФИНИЦИЯ	Диаметър	Извивка в основата	Диоптър (увеличение на лещата)	Диоптър (увеличение на цилиндъра)	Ос на цилиндъра
СИМВОЛ	ADD	LOW	HIGH		
ДЕФИНИЦИЯ	Диоптър (Допълнително увеличение)	Дизайн със слабо допълнително увеличение (+1,00 D)	Дизайн с голямо допълнително увеличение (+2,00 D)		

Производител: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

ЕС РЕП Упълномощен представител: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Дата на издаване 2024-06

©2024, Menicon Co., Ltd.

CE
0483

RA1DAYPI007_bg-250129TOR