

Uputstva za upotrebu: asmoofilcon A (40% vode) zamjenska kontaktna sočiva za dvije sedmice ili jedan mjesec

Važno

- Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstva u nastavku i čuvajte ovaj dokument na sigurnom mjestu za ubuduće.
- Uvijek slijedite uputstva iz ovog dokumenta i upute od optičara za pravilnu upotrebu kontaktnih sočiva i proizvoda za njegu sočiva, uključujući spremnike za sočiva.

ZAMJENSKA KONTAKTNA SOČIVA ZA DVIJE SEDMICE

Uvod

asmoofilcon A (40% vode) kontaktna su sočiva plave nijanse od mekanog silikonskog hidrogela sa sadržajem vode od 40%. Sterilni asmoofilcon A (40% vode) pojedinačno je pakiran u plastični spremnik zapečaćen folijom i uronjen u puferiranu fiziološku otopinu.

Indikacije

asmoofilcon A (40% vode) namijenjen je za jednostavno nošenje ili za produženo nošenje do sedam dana i korekciju refraktivne ametropije (miopija, hiperopija i/ili astigmatizam) za osobe koje nemaju afakiju i bolesti oka.

Ograničenja pri nošenju

Nakon vađenja, kontaktna sočiva očistite i dezinficirajte primjenjujući režim čišćenja i dezinfekcije koji vam je preporučio optičar. Kontaktna sočiva zamijenite novima svake dvije sedmice.

Posavjetujte se s optičarom o rasporedu nošenja kontaktnih sočiva na temelju vaših ličnih potreba. Nakon naznačenog perioda nošenja, uvijek odložite kontaktna sočiva. Nošenje kontaktnih sočiva nakon naznačenog perioda povećava rizik od problema s očima.

ZAMJENSKA KONTAKTNA SOČIVA ZA JEDAN MJESEC

Uvod

asmoofilcon A (40% vode) kontaktna su sočiva plave ili ljubičaste nijanse od mekanog silikonskog hidrogela sa sadržajem vode od 40%. Sterilni asmoofilcon A (40% vode) pojedinačno je pakiran u plastični spremnik zapečaćen folijom i uronjen u puferiranu fiziološku otopinu.

Indikacije

asmoofilcon A (40% vode) namijenjen je za dnevnu upotrebu i korekciju refraktivne ametropije (miopija, hiperopija i/ili astigmatizam) i/ili presbiopije za osobe koje nemaju afakiju i bolesti oka.

Ograničenja pri nošenju

Nakon vađenja, kontaktna sočiva očistite i dezinficirajte primjenjujući režim čišćenja i dezinfekcije koji vam je preporučio optičar. Kontaktna sočiva zamijenite novima svakog mjeseca.

Posavjetujte se s optičarom o rasporedu nošenja kontaktnih sočiva na temelju vaših ličnih potreba. Nakon naznačenog perioda nošenja, uvijek odložite kontaktna sočiva. Nošenje kontaktnih sočiva nakon naznačenog perioda povećava rizik od problema s očima.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte nositi kontaktna sočiva ako imate neko od sljedećih stanja:

- akutnu i subakutnu upalu ili infekciju prednje komore oka
- bilo kakvo oboljenje, ozljedu ili abnormalnost koja utječe na rožnjaču, konjunktivu ili očne kapke
- tešku insuficijenciju suznog sekreta (suhe oči)
- hiposteziyu rožnjače (smanjenje osjetljivosti rožnice)
- bilo kakvo sistemsko oboljenje koje može loše utjecati na oči pri nošenju kontaktnih sočiva
- alergijske reakcije koje se mogu pojaviti ili pogoršati prilikom nošenja kontaktnih sočiva
- bilo kakvu aktivnu infekciju rožnjače
- crvene ili nadražene oči
- nepotpuno zaraslu rožnjaču nakon operacijskog zahvata na oku

UPOZORENJA

Imajte na umu sljedeća upozorenja prilikom upotrebe kontaktnih sočiva.

- Problemi s očima nastali zbog nošenja kontaktnih sočiva i upotrebe proizvoda za njegu sočiva, kao što su čirevi rožnjače, mogu se brzo razviti i dovesti do gubitka vida. Ako osjetite bilo kakvu nelagodu u očima, prekomjerno suzenje, promjene vida, crvenilo u očima ili druge probleme, odmah uklonite sočiva i posavjetujte se optičaru.

MJERE OPREZA

- Pažljivo rukujte kontaktnim sočivima (pazite da ih ne ispustite).
- Nemojte dodirivati kontaktna sočiva noktima.
- Stavite kontaktna sočiva prije nanošenja kozmetičkih proizvoda. Nemojte nanositi kozmetičke proizvode, losione, kreme ili sprejeve prilikom rukovanja kontaktnim sočivima.
- Obratite se optičaru prije upotrebe bilo kakvog medicinskog proizvoda za oči.
- Ako imate osjećaj da su kontaktna sočiva suha, nanesite nekoliko kapi otopine za podmazivanje ili ovlaživanje (koju preporučuje vaš optičar) direktno u oči i pričekajte dok se sočiva mogu slobodno pomaknuti na očima prije nego što ih uklonite. Ako se neugoda i dalje nastavi, odmah se obratite optičaru.
- Izbjegavajte sve štetne ili nadražujuće pare i isparavanja prilikom upotrebe kontaktnih sočiva.
- Ako vam bilo kakve hemikalije dospiju u oči, odmah ih isperite mlakom vodom, uklonite kontaktna sočiva i obratite se optičaru ili posjetite odjel hitne pomoći.
- Posavjetujte se s optičarom za nošenje kontaktnih sočiva tokom sportskih aktivnosti ili aktivnosti u vodi ili ako se bavite specifičnim zanimanjem.
- Za multifokalna sočiva, preporučuje se da sočiva nosite samo u poznatim situacijama (ne situacijama koje su zahtjevne za gledanje) tokom perioda adaptacije. Posebno izbjegavajte upravljanje motornim vozilima tokom perioda adaptacije.
- Iznenadna svjetlost tokom nošenja multifokalnih sočiva može uzrokovati smanjenu vidnu oštrinu. Potražite savjet od optičara ako osjećate nelagodu tokom nošenja kontaktnih sočiva pri jakoj svjetlosti.
- Potrebno je odlaziti na redovite konzultacije s ljekarom da biste osigurali zdravlje očiju.
- Posavjetujte se s optičarom ako želite promijeniti vrstu ili parametre sočiva.
- Obavijestite svog ljekara o tome da nosite kontaktna sočiva.
- Pohranite kontaktna sočiva na sobnoj temperaturi. Pazite da ne dođe do zamrzavanja sočiva.
- Posavjetujte se s optičarom ako trebate spremite sočiva tokom produženih vremenskih perioda.
- Ako se kontaktna sočiva isuše u spremniku, natopite ih u otopini za natapanje (koju vam je preporučio optičar) najmanje jedan sat dok ponovo ne postanu vlažna, a zatim ih pregledajte kako biste se uvjerali da nisu oštećena. Očistite ih i dezinficirajte prije nošenja.
- Nemojte dijeliti kontaktna sočiva s drugim osobama.

NEŽELJENE POJAVE

Ako se javi bilo koji od sljedećih problema, odmah izvadite kontaktna sočiva i pregledajte ih kako biste se uvjerali da nisu oštećena. Ako sočiva nisu oštećena, očistite ih i dezinficirajte prije ponovnog nošenja. Ako se problem i dalje nastavi, uklonite sočiva i odmah zatražite pomoć. Može doći do ozbiljnih oštećenja očiju, kao što su upala, čir rožnjače, neovaskularizacija ili iritis.

- Bol u očima, peckanje, svrab ili druga vrsta nelagode u očima
- Osjećaj stranog tijela ili grebanja u očima
- Prekomjerno suzenje, neobičan sekret, crvenilo, smanjena oštrina vida, zamagljen vid, krug svjetlosti, fotofobija ili suhe oči

RUKOVANJE KONTAKTNIM SOČIVIMA

- Uvijek temeljito operite, isperite i osušite ruke prije rukovanja kontaktnim sočivima.
- Nemojte nositi kontaktna sočiva ako je sterilno pakovanje otvoreno ili oštećeno ili ako je istekao rok trajanja.
- Uvijek postupajte s lijevom i desnom kontaktnim sočivom istim redoslijedom da biste izbjegli zamjenu sočiva.

Otvaranje plastičnog spremnika s folijom:

1. Uklonite foliju sa spremnika da biste otvorili pakovanje.
2. Potražite kontaktno sočivo s ispučenom stranom okrenutom prema gore u spremniku.
3. Pažljivo izvadite sočivo iz spremnika i pregledajte je da biste se uvjerali da nema nikakvih oštećenja ili stranih tijela.

Stavljanje kontaktnih sočiva:

Opći postupak za stavljanje kontaktnih sočiva opisan je u nastavku. Za više informacija obratite se optičaru.

1. Stavite kontaktno sočivo na vrh kažiprsta dominantne ruke s udubljenom stranom okrenutom prema gore.
2. Pogledajte profil sočiva da biste se uvjerali da nije okrenuto naopako.
3. Držite očne kapke široko otvorenima tako da povučete gornji kapak kažiprstom nedominantne ruke, a donji kapak srednjim prstom dominantne ruke.
4. Polako prinesite sočivo oku gledajući ravno i nježno ga stavite na rožnjaču.
 - Nemojte pritiskati sočivo o oko.
5. Pogledajte prema dolje, najprije otpustite gornji kapak, a zatim donji i nježno trepnite.
6. Ponovite taj postupak s drugim sočivom.

Ako vam je vid zamagljen nakon stavljanja kontaktnih sočiva:


- Ako kontaktna sočiva nisu centrirana na rožnjači:
Pogledajte u ogledalo i nježno pomaknite rub sočiva na rožnjaču dok otvarate oko. Prstom pritisnite rub gornjeg ili donjeg kapka dok se sočivo ne centrira na rožnjači.
- Ako su kontaktna sočiva centrirana na rožnjači:
Uklonite sočiva. Mogući su sljedeći uzroci.
 - Površina sočiva je nečista.
 - Sočiva su zamijenjena.
 - Sočiva su stavljena naopako u oči.
- Ako vam je vid i dalje zamagljen nakon rješavanja gore navedenih problema, uklonite kontaktna sočiva i posavjetujte se s optičarom.
- Ako osjećate značajnu neugodnost pri upotrebi kontaktnih sočiva, odmah ih uklonite i obratite se optičaru.
- Za torična kontaktna sočiva, stavite sočiva na rožnjaču s oznakom okrenutom prema dolje. (Pogledajte sl. 1)
- Za multifokalna sočiva (ADD HIGH), stavite sočiva u rožnicu s trokutom usmjerenim prema sljepoočnicama. (Pogledajte sl. 2)



Sl. 1

Uklanjanje kontaktnih sočiva:

1. Pogledajte prema gore dok držite glavu ravno.
2. Srednjim prstom nedominantne ruke povucite donji kapak prema dolje i stavite kažiprst dominantne ruke na donji rub kontaktnog sočiva.
3. Povucite sočivo prema dolje do donjeg bijelog dijela oka.
4. Nježno stisnite sočivo između palca i kažiprsta dominantne ruke.
5. Uklonite sočivo.
6. Ponovite taj postupak s drugim sočivom.

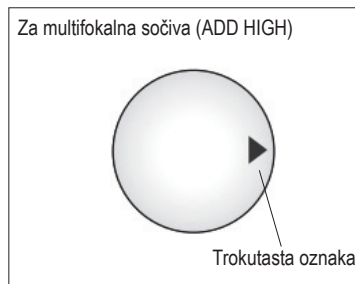

Sl. 2

NJEGA KONTAKTNIH SOČIVA

- Uvijek koristite proizvode za njegu koje vam je preporučio optičar. Nikad nemojte koristiti proizvode za njegu polutvrdih plinopropusnih sočiva.
- Nemojte koristiti vodu za njegu kontaktnih sočiva i spremnika za sočiva. Upotreba vode povećava rizik od mikrobne infekcije.
- Uvijek koristite svježe proizvode za njegu sočiva kojima nije istekao rok trajanja.
- Proizvode za njegu sočiva nemojte miješati niti mijenjati osim ako to nije navedeno na uputstvima za proizvod ili ako vam to nije preporučio optičar.
- Dezinfekcija zagrijavanjem se ne preporučuje.
- Kad ih ne koristite, kontaktna sočiva čuvajte potpuno uronjenima u otopini za čuvanje.
- Spremnik za sočiva očistite i isperite proizvodima za njegu sočiva te pustite da se osuši na zraku nakon svake upotrebe. Kontaktna sočiva zamijenite u redovitim intervalima.

SIMBOLI KOJI SE KORISTE NA PAKOVANJU I PLASTIČNOM SPREMNIKU S FOLIJOM

SIMBOL		LOT		STERILE	
DEFINICIJA	Pročitajte uputstva za upotrebu	Kod serije	Koristiti do datuma (rok upotrebe)	Sterilisano parom ili suhim toplim zrakom	
SIMBOL	DIA	BC	P	CYL	AXIS
DEFINICIJA	Promjer	Osnovna krivulja	Dioptrija (Jačina sočiva)	Dioptrija (Jačina cilindra)	Cilindrična os
SIMBOL	ADD	HIGH	LOW		
DEFINICIJA	Dioptrija (dodatna jačina)	Visoka dodatna jačina (+2,00 D)	Niska dodatna jačina (+1,00 D)		

Proizvođač: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

EC REP Ovlašteni zastupnik: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Datum izdavanja 2018-02

©2018, Menicon Co., Ltd.

CE
0483

RDASRBPI002_bs