

Uputstva za upotrebu: asmoofilcon A (40% vode) za kontaktna sočiva koja se zamenjuju svake 2 nedelje ili 1 mesec

Važno

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte sledeća uputstva i držite ovaj dokument na bezbednom mestu za buduću referencu.
- Uvek pratite uputstva iz ovog dokumenta i dokumentaciju svog profesionalca ili stručnjaka za očne bolesti za odgovarajuću upotrebu kontaktnih sočiva i proizvode za održavanje kontaktnih sočiva, uključujući kontaktna sočiva.

ZA KONTAKTNA SOČIVA KOJA SE ZAMENJUJU SVAKE 2 NEDELJE

Uvod

asmoofilcon A (40% vode) je plavo obojeno meko silikonsko hidrogel kontaktno sočivo sa 40% sadržajem vode.

Sterilna kontaktna sočiva asmoofilcon A (40% vode) pojedinačno su upakovana u plastično pakovanje zaptiveno folijom i potopljena u puferovani fiziološki rastvor.

Indikacije

asmoofilcon A (40% vode) namenjen je za jednodnevno ili produženo nošenje do 7 dana i korekciju refraktivne ametropije (miopija hiperopija i/ili astigmatizam) kod ne-afakičnih očiju bez bolesti.

Ograničenja nošenja

Očistite i dezinfikujte kontaktna sočiva nakon uklanjanja sočiva koristeći režim čišćenja i dezinfekcije koji vam preporučuje vaš profesionalac ili stručnjak za očne bolesti. Zamenite kontaktna sočiva svake 2 nedelje novim sočivima.

Obavezno konsultujte svog profesionalca ili stručnjaka za očne bolesti za raspored nošenja sočiva na osnovu vaših individualnih potreba. Uvek odlažite kontaktna sočiva nakon navedenog perioda nošenja sočiva. Nošenje kontaktnih sočiva izvan navedenog perioda nošenja sočiva povećava rizik od problema sa očima.

ZA KONTAKTNA SOČIVA KOJA SE ZAMENJUJU SVAKI 1 MESEC

Uvod

asmoofilcon A (40% vode) je plavo ili boje lavande obojeno meko silikonsko hidrogel kontaktno sočivo sa 40% sadržajem vode.

Sterilna kontaktna sočiva asmoofilcon A (40% vode) pojedinačno su upakovana u plastično pakovanje zaptiveno folijom i potopljena u puferovani fiziološki rastvor.

Indikacije

asmoofilcon A (40% vode) namenjen je za dnevnu upotrebu i korekciju refraktivne ametropije (miopija hiperopija i/ili astigmatizam) i/ili dalekovidost kod ne-afakičnih očiju bez bolesti.

Ograničenja nošenja

Očistite i dezinfikujte kontaktna sočiva nakon uklanjanja sočiva koristeći režim čišćenja i dezinfekcije koji vam preporučuje vaš profesionalac ili stručnjak za očne bolesti. Zamenite kontaktna sočiva svakih mesec dana novim sočivima.

Obavezno konsultujte svog profesionalca ili stručnjaka za očne bolesti za raspored nošenja sočiva na osnovu vaših individualnih potreba. Uvek odlažite kontaktna sočiva nakon navedenog perioda nošenja sočiva. Nošenje kontaktnih sočiva izvan navedenog perioda nošenja sočiva povećava rizik od problema sa očima.

KONTRAINDIKACIJE

Ne nosite kontaktna sočiva ako imate bilo koje od sledećih stanja:

- akutna i subakutna upala ili infekcija prednje očne komore
- bilo koja bolest, povreda ili abnormalnost koja utiče na rožnjaču, vežnjaču ili očne kapke
- teža insuficijencija lakrimalnog sekreta (suve oči)
- hipostezija rožnjače (smanjena osetljivost rožnjače)
- svaka sistematska bolest koja može negativno da utiče na oči nošenjem kontaktnih sočiva
- alergijske reakcije koje mogu biti indukovane ili pojačane nošenjem kontaktnih sočiva
- bilo koja aktivna infekcija rožnjače
- crvene ili iritirane oči
- nepotpuno zarastanje rožnjače nakon operacije očiju

UPOZORENJA

Budite svesni sledećih upozorenja koja se odnose na nošenje kontaktnih sočiva:

- problemi sa očima koji proističu iz nošenja kontaktnih sočiva i proizvoda za održavanje kontaktnih sočiva, kao što su čirevi rožnjače, mogu se brzo razviti i dovesti do gubitka vida. Ako imate bilo kakve nelagodnosti sa očima, prekomerno suzenje, promena vida, crvenilo u očima ili druge probleme, odmah uklonite sočiva i konsultujte svog profesionalca ili stručnjaka za očne bolesti.

MERE OPREZA

- Pažljivo rukujte kontaktnim sočivima (pazite da ih ne ispuštite).
- Nemojte dodirivati kontaktna sočiva noktima.
- Stavite kontaktna sočiva pre nanošenja kozmetike. Ne nanosite kozmetiku, losione, kreme ili sprejeve dok rukujete kontaktnim sočivima.
- Obratite se svom profesionalcu ili stručnjaku za očne bolesti pre nego što počnete da koristite lekove u očima.
- Ako osećate da su kontaktna sočiva suva na vašim očima, stavite nekoliko kapi rastvora za podmazivanje ili ponovno kvašenje (koji vam je preporučio vaš profesionalac ili stručnjak za očne bolesti) direktno na oči i sačekajte dok se sočiva ne mogu slobodno da kreću po očima pre nego ih uklonite. Ukoliko se nelagodnost i dalje nastavi, odmah se obratite profesionalcu ili stručnjaku za očne bolesti.
- Izbegavajte sva štetna ili nadražujuća isparenja i dimove dok nosite kontaktna sočiva.
- Ako neke hemikalije prsnu u oči, odmah isperite oči vodom iz česme, uklonite kontaktna sočiva i posavetujte se sa svojim profesionalcem ili stručnjakom za očne bolesti ili otiđite u hitnu.
- Posavetujte se sa svojim profesionalcem ili stručnjakom za očne bolesti za uputstva o nošenju kontaktnih sočiva tokom sportskih ili vodenih aktivnosti ili kod određenih zanimanja.
- Za multifokalna kontaktna sočiva preporučuje se da nosite sočiva samo u poznatim situacijama (ne vizuelno zahtevnim situacijama) tokom perioda adaptacije. Naročito izbegavajte vožnju motornog vozila tokom perioda adaptacije.
- Naglo svetlo dok nosite multifokalna kontaktna sočiva može izazvati smanjenu vidljivost. Obratite se svom profesionalcu ili stručnjaku za očne bolesti ako osećate nelagodnosti kada nosite sočiva po jakom svetlu.
- Potrebne su naknadne posete kako bi se obezbedilo održavanje zdravlja vaših očiju.
- Posavetujte se sa svojim profesionalcem ili stručnjakom za očne bolesti ako želite da promenite vrstu ili parametre sočiva.
- Obavestite svog lekara da nosite kontaktna sočiva.
- Čuvajte kontaktna sočiva na sobnoj temperaturi. Ne dozvolite da se sočiva zamrznu.
- Posavetujte se sa svojim profesionalcem ili stručnjakom za očne bolesti ako treba da odložite sočiva za produženu upotrebu.
- Ako kontaktna sočiva dehidriraju u kutijici za sočiva, natopite sočiva u rastvoru za natapanje (koje vam je preporučio vaš profesionalac ili stručnjak za očne bolesti), najmanje 1 sat dok sočiva ne rehidriraju, a zatim proverite sočiva kako biste bili sigurni da na njima nema nikakvih oštećenja. Očistite i dezinfikujte sočiva pre no što ih nosite.
- Ne delite kontaktne sočiva sa drugim osobama.

NEŽELJENE REAKCIJE

Ako se dogodi neki od sledećih problema, odmah izvadite kontaktna sočiva i proverite da na njima nema nikakvih oštećenja. Ako kontaktna sočiva nisu oštećena, očistite i dezinfikujte sočiva pre ponovnog nošenja. Ako se problem i dalje nastavi, uklonite sočiva i potražite hitan tretman. Može doći do težih oštećenja očiju kao što je infekcija, čir rožnjače, neovaskularizacija i zapaljenje dužice.

- Bockanje, peckanje, svrab u očima ili bilo koji drugi bol u očima
- Nепrekidno prisustvo stranog tela ili osećaj grebanja
- Prekomerno nošenje, neuobičajen sekret iz očiju, crvenilo, smanjena oštrina vida, zamućen vid, halos, fotofobija ili suve oči

RUKOVANJE KONTAKTNIM SOČIVIMA

- Uvek operite, isperite i osušite ruke temeljno pre rukovanja kontaktnim sočivima.
- Ne nosite kontaktna sočiva ako su sterilni paketi otvoreni ili oštećeni, ili ako je istekao rok upotrebe.
- Uvek rukujte levim i desnim kontaktnim sočivom istim redosledom kako biste izbegli da pomešate sočiva.


Otvaranje plastičnog pakovanja zaptivenog folijom:

1. Skinite foliju sa pakovanja kako biste otvorili paket.
2. Pronađite jedno kontaktno sočivo sa konkavnom stranom okrenutom prema gore u pakovanju.
3. Pažljivo uzmite sočivo iz pakovanja i proverite je da li na njemu nema nikakvih oštećenja ili stranih tela.


Stavljanje kontaktnog sočiva:

Opšti postupak za stavljanje kontaktnih sočiva opisan je u nastavku. Posavetujte se sa svojim profesionalcem ili stručnjakom za očne bolesti za više detalja ako je potrebno.

1. Stavite kontaktno sočivo na vrh kažiprsta dominantne ruke sa konkavnom stranom okrenutom prema gore.
 2. Proverite profil sočiva kako biste bili sigurni da nije izvrnuto.
 3. Držite kapke široko razmaknutim tako što ćete povući gornji kapak pomoću kažiprsta nedominantne ruke a donji kapak srednjim prstom dominantne ruke.
 4. Polako dovedite sočivo do oka dok gledate pravo napred i pažljivo stavite sočivo na rožnjaču.
 - Nemojte pritiskati sočivo na oko.
 5. Pogledajte dole, prvo otpustite gornji kapak, a zatim donji kapak, i blago trepnite.
 6. Ponovite ovaj postupak za drugo sočivo.
- Ako vam je vid zamagljen nakon postavljanja kontaktnih sočiva:
 - Ako kontaktna sočiva nisu centrirana na rožnjači: Pogledajte u ogledalo i pažljivo pomerajte ivicu sočiva da biste ga premestili na rožnjaču dok vam je oko otvoreno. Pritiskajte prstom ivicu gornjeg ili donjeg kapka dok se sočivo ne centrira na rožnjaču.
 - Ako su kontaktna sočiva centrirana na rožnjači: Skinite sočiva. Mogući uzroci su sledeći:
 - Površina sočiva je prljava.
 - Sočivo su na pogrešnim očima.
 - Sočiva su izvrnuta stavljena na oči.
 - Ako vam je vid i dalje zamućen nakon što otklonite gore navedene probleme, uklonite kontaktna sočiva i posavetujte se sa svojim profesionalcem ili stručnjakom za očne bolesti.
 - Ako osećate znatnu nelagodnost dok nosite kontaktna sočiva, odmah uklonite sočiva i posavetujte se sa svojim profesionalcem ili stručnjakom za očne bolesti.
 - Za torična kontaktna sočiva: postavite sočiva na rožnjaču sa oznakom za navođenje okrenutom prema dole. (pogledajte sl. 1)
 - Za multifokalna kontaktna sočiva (ADD HIGH), postavite sočiva na rožnjaču sa trouglastom oznakom koja pokazuje na temporalnu stranu. (pogledajte sl. 2)

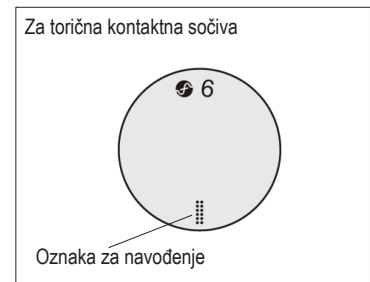

Sl. 1

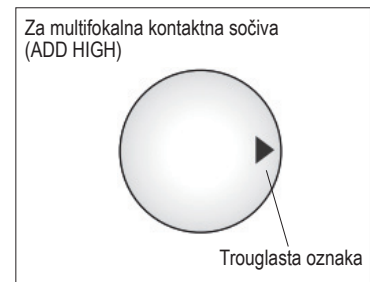

Sl. 2

Uklanjanje kontaktnog sočiva:

1. Gledajte prema gore dok držite glavu pravo.
2. Povucite donji kapak srednjim prstom vaše nedominantne ruke i stavite kažiprst vaše dominantne ruke na donju ivicu kontaktnog sočiva.
3. Prevucite sočivo dole na donji beli deo vašeg oka.
4. Pažljivo uštinite sočivo palcem i kažiprstom vaše dominantne ruke.
5. Skinite sočivo.
6. Ponovite ovaj postupak za drugo sočivo.

BRIGA O KONTAKTNIM SOČIVIMA

- Uvek koristite proizvode za negu sočiva koje preporučuje profesionalac ili stručnjak za očne bolesti. Nikada nemojte koristiti proizvode za negu za tvrdo gas propusno kontaktno sočivo.
- Nemojte koristiti vodu iz slavine za negu kontaktnih sočiva i kutijice za sočiva. Upotreba vode iz slavine povećava rizik od mikrobne infekcije.
- Uvek koristite nove i neoštećene proizvode za negu sočiva.
- Nemojte menjati ili mešati proizvode za negu sočiva, osim ako to nije navedeno u uputstvima za proizvod ili preporučeno od strane vašeg profesionalca ili stručnjaka za očne bolesti.
- Dezinfekcija toplotom se ne preporučuje.
- Čuvajte kontaktna sočiva potpuno uronjena u rastvor za odlaganje kada se ne koristi.
- Očistite i isperite kutijicu za sočiva sa proizvodima za negu i ostavite da se osuši nakon svake upotrebe. Redno zamenite kutijicu za sočiva.

SIMBOLI KOJI SE KORISTE NA AMBALAŽI I PLASTIČNOM PAKOVANJU ZAPTIVENOM FOLIJOM

SIMBOL		LOT		STERILE	
DEFINICIJA	Pročitajte uputstva za upotrebu	Šifra partije	Datum roka upotrebe (rok trajanja)	Sterilisano parom ili suvom toplotom	
SIMBOL	DIA	BC	P	CYL	AXIS
DEFINICIJA	Prečnik	Zakrivljenost osnove	Dioptrija (Jačina sočiva)	Dioptrija (Jačina cilindra)	Osa cilindra
SIMBOL	ADD	HIGH	LOW		
DEFINICIJA	Dioptrija (jačina uvećanja)	Dizajn velike jačine uvećanja (+2,00 D)	Dizajn male jačine uvećanja (+1,00 D)		

Proizvođač: Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japan www.menicon.com

Ovlašćeni predstavnik: Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Datum izdavanja 2018-02

©2018, Menicon Co., Ltd.

CE
0483

RDASRP1002_sr